

QuantiCyto

小鼠IL-1 β ELISA试剂盒(高灵敏)

Mouse IL-1 β ELISA kit(HS)

Cat# : EMC001b(H)

尊敬的客户，感谢您选用本公司 QuantiCyto® ELISA 系列产品。本产品选用世界著名生产厂家的原料，采用专业体外诊断试剂生产技术制造，仅供科研使用。本产品可检测血清、血浆、细胞培养上清液、灌洗液、尿液、羊水、腹水、脑脊液、胸腔积液、组织匀浆液等多种类型样本中天然和重组小鼠 IL-1 β 浓度，具体适用样本请咨询。使用前请仔细阅读说明书并检查试剂组分。如有疑问，请联系欣博盛生物科技有限公司。Email: tech@neobioscience.com，全国服务热线：4006 800 892。



试剂盒组成：

名 称	48T	96T
抗体预包被酶标板	8×6	8×12
冻干标准品	<u>1ng/支</u> ×2 支	<u>1ng/支</u> ×3 支
标准品&标本通用稀释液	12 ml×1 瓶	20 ml×1 瓶
浓缩生物素化抗体	1 支(规格见标签)	1 支 (规格见标签)
生物素化抗体稀释液	10 ml×1 瓶	16 ml×1 瓶
浓缩酶结合物	1 支(规格见标签)	1 支 (规格见标签)
酶结合物稀释液	10 ml×1 瓶	16 ml×1 瓶
浓缩洗涤液 20×	25 ml×1 瓶	50 ml×1 瓶
显色底物 (TMB)	6 ml×1 瓶	12 ml×1 瓶
反应终止液 <u>具腐蚀性</u>	6 ml×1 瓶	12 ml×1 瓶
封板胶纸	3 张	6 张
产品说明书	1 份	1 份

储存条件：

未开封完整试剂盒		4℃保存，请在保质期内使用。
已开封 试剂盒	抗体包被板条	未用完的板条放回带拉链铝箔袋，封好口。4℃条件下可储存 1 个月左右。
	标准品	冻干粉-20℃可储存 6 个月左右。稀释后的标准品使用后请丢弃。
	浓缩生物素化抗体	浓缩液 4℃可储存 1 个月左右，稀释后即弃。
	浓缩酶结合物 (避光)	
	标准品&标本通用稀释液	4℃条件下，可储存 1 个月左右。
	生物素化抗体稀释液	
	酶结合物稀释液	
	显色底物 (避光)	
反应终止液		
浓缩洗涤液 20×		

备注：所有试剂的批号见标签。

检测原理:

欣博盛 QuantiCyto® ELISA试剂盒采用双抗体夹心法：抗小鼠IL-1 β 单抗包被于酶标板上，标本和标准品中的小鼠IL-1 β 会与单抗结合，游离的成分被洗去。加入生物素化的抗小鼠IL-1 β 抗体和辣根过氧化物酶标记的亲合素，生物素与亲合素特异性结合；抗小鼠IL-1 β 抗体与结合在单抗上的小鼠IL-1 β 结合而形成免疫复合物，游离的成分被洗去。加入显色底物，若反应孔中有小鼠IL-1 β ，辣根过氧化物酶会使无色的显色剂现蓝色，加终止液变黄。在450 nm处测OD值，小鼠IL-1 β 浓度与OD₄₅₀值之间呈正比，可通过绘制标准曲线求出标本中小鼠IL-1 β 的浓度。


试验所需自备试验器材 (不提供，但可协助购买)：

1. 酶标仪(450 nm波长滤光片)
2. 进口品牌高精度加液器及一次性吸头：0.5-10 ul, 2-20 ul, 20-200 ul, 200-1000 ul。
3. 37 °C恒温箱，双蒸水或去离子水，坐标纸等。

可协助代购相关产品，请咨询。

QuantiCyto®

QuantiCyto® 双抗体夹心法ELISA原理图：

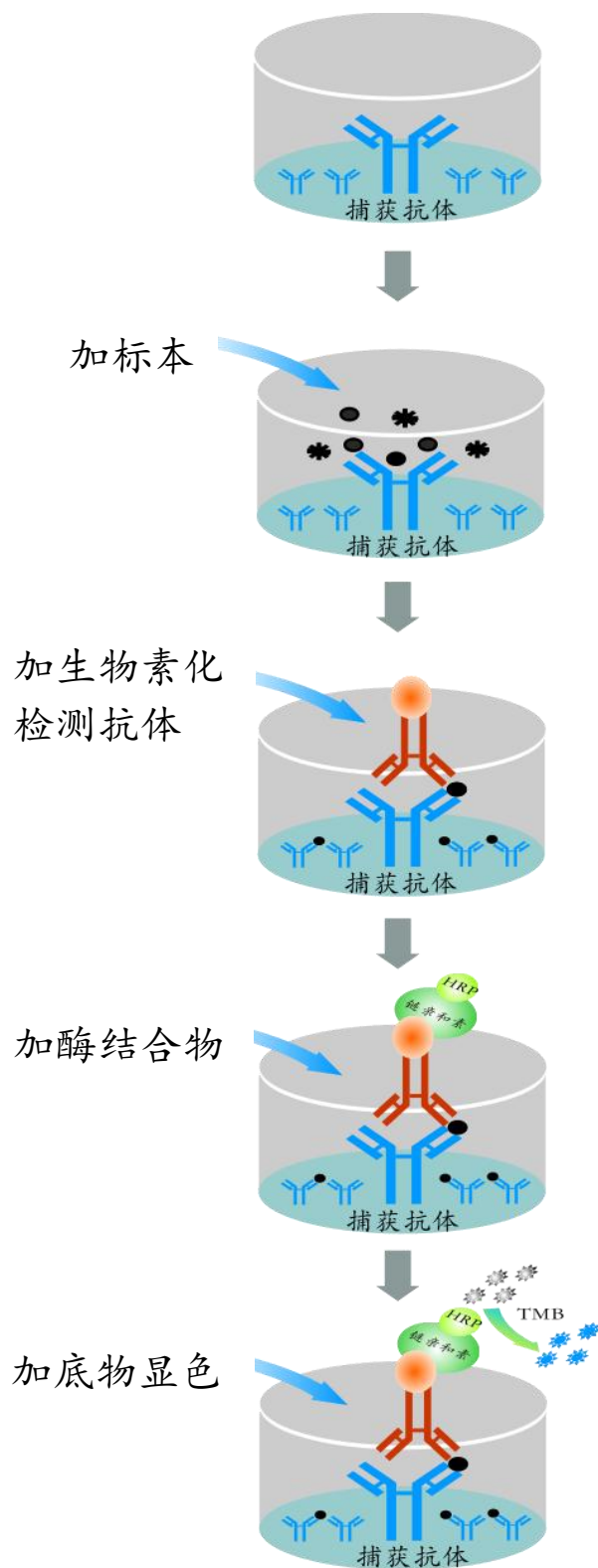

标本收集:

1. 收集血液的试管应为一次性的无热原，无内毒素试管。
2. 血浆抗凝剂推荐使用EDTA。避免使用溶血，高血脂标本。
3. 标本应清澈透明，悬浮物应离心去除。
4. 标本收集后若不及时检测，请按一次使用量分装，冻存于-20℃，-70℃电冰箱内，避免反复冻融，3-6个月内检测。
5. 如果您的样本中检测物浓度高于标准品最高值，请根据实际情况，做适当倍数稀释(建议做预实验，以确定稀释倍数)。

注意事项:


1. 试剂盒使用前请保存在2-8℃。复溶后的标准品若未用完，请废弃。
2. 浓缩生物素化抗体，浓缩酶结合物体积小，运输中颠簸和可能的倒置，会使液体沾到管壁或瓶盖。因此使用前请用手甩几下或1000转/分离心1分钟，以使附着管壁或瓶盖的液体沉积到管底。取用前，请用移液器小心吹打4-5次使溶液混匀。
3. 从冰箱中取出的浓缩洗涤液可能有结晶,属于正常现象，微加热至40℃使结晶完全溶解后再配制洗涤液。(加热温度不要超过50℃)使用时洗涤液应为室温。
4. 不同批号的试剂盒组份不能混用(洗涤液和反应终止液除外)。请提前咨询欣博盛生物科技有限公司。
5. 充分轻微混匀对反应结果尤为重要，最好使用微量振荡器(使用最低频率)，如无微量振荡器，可在反应前手工轻轻敲击酶标板框混匀。
6. 在试验中标准品和样本检测时建议作双孔检测。
7. 试验中所用的试管和吸头均为一次性使用，**严禁在不同的液体之间混用！否则将影响试验结果。**
8. 试验中请穿着试验服并带乳胶手套做好防护工作。特别是检测血液或者其他体液标本时，请按国家生物实验室安全防护条例执行。
9. **如果分次使用，请根据需要量配制各组分，以免配制过多造成浪费而影响后续试验。剩余板孔请用封板胶纸封住，放回铝箔袋中，2个月内用完。**

检测前准备工作:

1. 请提前20分钟从冰箱中取出试剂盒，以平衡至室温。
2. 用双蒸水将**20×浓缩洗涤液**稀释成**1×工作液**。未用完的放回4℃。
3. 标准品: 加入标准品&标本通用稀释液**1.0ml**至冻干标准品中，静置15分钟，待其充分溶解后，轻轻混匀(浓度为**1000 pg/ml**)。然后根据需要进行稀释。(建议标准曲线使用以下浓度：**500、250、125、62.5、31.25、15.6、7.8、0 pg/ml**)。0 pg/ml即空白孔。复溶标准品原液(**1000 pg/ml**)若未用完的请废弃。
4. 生物素化抗体工作液: 按当次试验所需要得用量，使用前20分钟，用生物素化抗体稀释液将**30×浓缩生物素化抗体**稀释成**1×工作液**。当日使用。若实验次数过多导致生物素化抗体量不足，可向欣博盛公司单独购买生物素化抗体。(须提供抗体批号)
5. 酶结合物工作液: 按当次试验所需要的用量，使用前20分钟，用酶结合物稀释液将**30×浓缩酶结合物**稀释成**1×工作液**。当日使用。若实验次数过多导致浓缩酶结合物量不足，可向欣博盛公司单独购买浓缩酶结合物。(须提供酶结合物批号)

标准品稀释方法图例:

以500 ul/管为例，用标准品&标本通用稀释液将复溶后的标准品母液进行倍比稀释，具体稀释方法如下图，也可根据实际用量来稀释，如200 ul/管。

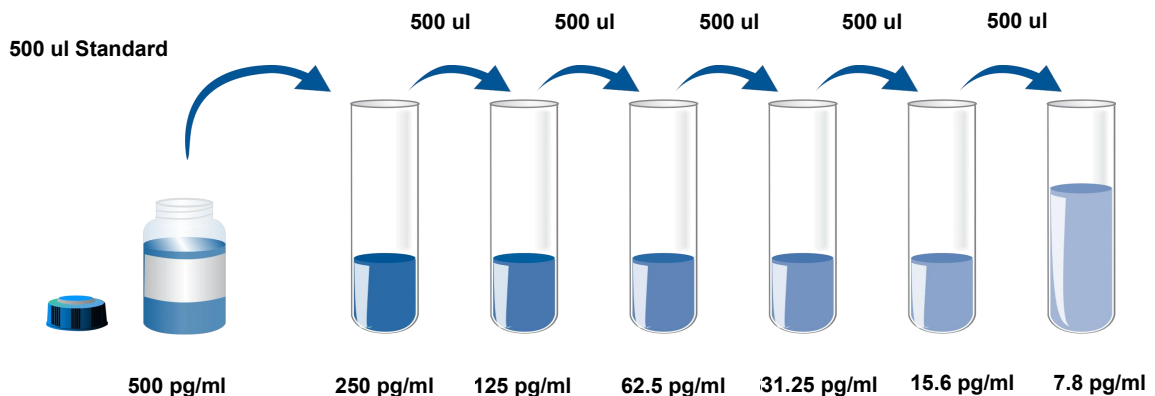

洗涤方法:

1. 自动洗板机：要求注入的洗涤液为350 ul，注入与吸出间隔30—60秒。洗板5次。
2. 手工洗板：甩尽孔内液体，在洁净的吸水纸上拍干，每孔加洗涤液350 ul，静置30秒后甩尽液体，在厚实吸水纸上拍干。洗板5次。

操作步骤:

1. 从已平衡至室温的密封袋中取出试验所需板条，未用的板条和干燥剂请放回铝箔袋内压实自封条，密封口袋，放回4 °C。
2. 空白孔加**标准品&标本通用稀释液**，其余相应孔中加标本或不同浓度标准品(100 ul/孔)，用封板胶纸封住反应孔，37 °C恒温箱，避光孵育90分钟。
3. 提前20分钟准备生物素化抗体工作液。
4. 洗板5次。
5. 空白孔加生物素化抗体稀释液，其余孔加入生物素化抗体工作液(100 ul/孔)。用新封板胶纸封住反应孔，37 °C恒温箱，避光孵育60分钟。
6. 提前20分钟准备酶结合物工作液。避光室温(22-25 °C)放置。
7. 洗板5次。
8. 空白孔加酶结合物稀释液，其余孔加入酶结合物工作液(100 ul/孔)。用新封板胶纸封住反应孔，37 °C恒温箱，避光孵育30分钟。
9. 打开酶标仪电源，预热仪器，设置好检测程序。
10. 洗板5次。
11. 加入显色底物(TMB)100 ul/孔，37 °C恒温箱，避光孵育15分钟。
12. 加入反应终止液100 ul/孔，混匀后即刻测量OD₄₅₀值(3分钟内)。在仪器保存读数结果并打印一份纸质结果。
13. 实验完毕后将未用完的试剂按规定的保存温度放回电冰箱保存至有效期结束。
建议保存酶标板框，以备下次或者今后试验使用。


结果判断:

1. 每个标准品和标本的OD值应减去空白孔的OD值。
2. 以标准品浓度作横坐标，OD值作纵坐标，手工绘制或用软件绘制并选取最佳拟合曲线，推荐使用二次多项式方程拟合。通过标本的OD值可在标准曲线上查出其浓度。
3. 若标本OD值高于标准曲线上限，应适当稀释后重测，计算浓度时应乘以稀释倍数。

Chart of data

Dose (pg/ml)	Raw Data		Average	Corrected
0	0.051	0.053	0.052	
7.8	0.089	0.090	0.090	0.038
15.6	0.123	0.112	0.118	0.066
31.25	0.193	0.189	0.191	0.139
62.5	0.292	0.289	0.291	0.239
125	0.519	0.520	0.520	0.468
250	1.059	1.069	1.064	1.012
500	2.285	2.231	2.258	2.206

Plot mouse IL-1β standard curve

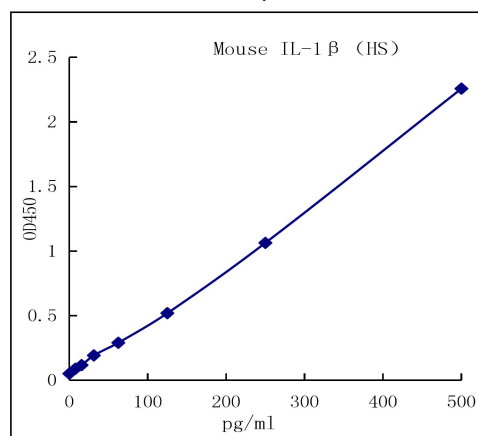

注意: 本图仅供参考，应以同次试验标准品所绘标准曲线计算标本中小鼠IL-1β的含量。

灵敏度、特异性和重复性:

- 灵敏度: 最小可测小鼠IL-1β达3.9 pg/ml(8次独立重复实验平均值)。
- 特异性: 本试剂盒特异性识别天然和重组小鼠IL-1β。与以下细胞因子等无明显交叉反应。

Mouse		Rat		Human	
IL-1α	IL-6	IL-1α	IL-6	IL-1α	IL-6
IL-2	TNF-α	IL-1β	TNF-α	IL-1β	TNF-α
IL-3		IL-2		IL-2	IFN-γ
IL-4		IL-4		IL-4	

- 重复性: 板内，板间变异系数均<10%。

样本	板内重复性			板间重复性		
	1	2	3	1	2	3
重复次数	8	8	8	10	10	10
平均值(pg/ml)	400.3	210.9	50.2	412.9	206.3	54.2
标准差	32.82	16.66	3.71	32.21	15.27	4.44
变异系数(%)	8.2	7.9	7.4	7.8	7.4	8.2

小鼠 IL-1 β 简介:

IL-1用以命名两个由不同基因编码的多效性细胞因子—IL-1 α (IL-1F1) 和IL-1 β (IL-1F2)。IL-1 α 和IL-1 β 为结构上相关的多肽，在小鼠中大约具有17%的氨基酸序列同一性。多种细胞在应答炎症反应物质、感染和微生物内毒素时，产生这两种蛋白质。IL-1 α 和IL-1 β 受独立的调控，虽然它们结合相同的受体，行使相同的生物学效应。IL-1RI直接与IL-1 α 或IL-1 β 结合，然后与IL-1R辅助蛋白(accessory protein) IL-1R3/IL-1R AcP偶联形成一个高亲合力的受体复合物，从而进行信号传导。IL-1 RII对IL-1 β 具有较高的亲合性，但作为诱捕受体(decoy receptor) 发挥作用，负调控IL-1 β 的活性。IL-1ra作为竞争性抑制剂发挥作用，阻止IL-1 α 和 IL-1 β 与IL-1 RI相互作用。小鼠IL-1 β 的cDNA编码一个由269个氨基酸残基组成的前体蛋白，117个氨基酸残基在胞内由半胱氨酸蛋白酶IL-1 β -转换酶(Caspase-1/ICE)切割，产生具有活性的细胞因子。17kDa的成熟小鼠IL-1 β 与棉鼠和大鼠的IL-1 β 具有90%的氨基酸序列同一性，与犬、马、猫、人、猪和猴的IL-1 β 具有65%-78%的同一性。

文献引用:

Hu B, Y. S., Shi C, et al. (2020). Amyloid-Polyphenol Hybrid Nanofilaments Mitigate Colitis and Regulate Gut Microbial Dysbiosis. ACS nano.

Lin S, C. Y., Zhang H, et al. (2019). Copper Tannic Acid Coordination Nanosheet: A Potent Nanozyme for Scavenging ROS from Cigarette Smoke. Small.

Zhao Y, Y. C., Yu Y, et al. (2019). Bioinspired Heteromultivalent Ligand-Decorated Nanotherapeutic for Enhanced Photothermal and Photodynamic Therapy of Antibiotic-Resistant Bacterial Pneumonia. ACS applied materials & interfaces.

Li S, X. A., Li H, et al. (2019). A self-assembled, ROS-responsive Janus-prodrug for targeted therapy of inflammatory bowel disease. Journal of Controlled Release.

Wang C, L. Q., Lv J, et al. (2019). Alpha-hemolysin of uropathogenic Escherichia coli induces GM-CSF-mediated acute kidney injury. Mucosal immunology.

Dai L, L. Y., Cheng L, et al. (2019). SARI attenuates colon inflammation by promoting STAT1 degradation in intestinal epithelial cells. Mucosal immunology.

Wang Y, L. L., Zhao W, et al. (2018). Targeted Therapy of Atherosclerosis by a Broad-Spectrum Reactive Oxygen Species-Scavenging Nanoparticle with Intrinsic Anti-Inflammatory Activity. ACS nano.

Zhu J, L. F., Wang X, et al. (2018). Hyaluronic Acid and Polyethylene Glycol Hybrid Hydrogel Encapsulating Nanogel with Hemostasis and Sustainable Antibacterial Property for Wound Healing. ACS applied materials & interfaces.

Hao Chen, Dahai Yang, Fajun Han, et al. (2017). "The Bacterial T6SS Effector EvpP Prevents NLRP3 Inflammasome Activation by Inhibiting the Ca²⁺-Dependent MAPK-Jnk Pathway." Cell Host Microbe.

Aubert D F, Xu H, Yang J, et al. (2016). "A Burkholderia Type VI Effector Deamidates Rho GTPases to Activate the Pyrin Inflammasome and Trigger Inflammation." Cell Host & Microbe.

Shi J, Zhao Y, Wang K, et al. (2015). "Cleavage of gsdmd by inflammatory caspases determines pyroptotic cell death." Nature.

Xu H, Yang J, Gao W, et al. (2014). "Innate immune sensing of bacterial modifications of Rho GTPases by the Pyrin inflammasome." Nature.

Yue Zhao, Jieling Yang, et al. (2011). "The NLRC4 inflammasome receptors for bacterial flagellin and type III secretion apparatus." Nature.

Rev 231012SY

QuantiCyto® ELISA 常见问题分析:**问题一：高背景或阴性对照值偏高**

可能原因	建议
阴性对照孔被阳性对照或样品污染	洗涤时，勿将洗液溢出孔外。
洗涤不充分	确保在洗涤时每个孔都充满了液体，确保将残余液体从孔中移除。
酶结合物过浓	请检查酶结合物是否按说明书规定稀释
孵育温度过高	检查孵育箱的温度是否正确、稳定
底物在使用前曝光	应保存在暗处，避光。
读板前停留时间过长	加终止液后 3 分钟内读数

问题二：阳性对照值偏低或低吸光度

可能原因	建议
试剂未平衡至室温	开始实验前，将试剂盒平衡至室温
包袋中有湿气	首次开袋标上日期，封好未使用的孔条，放入干燥剂。
样本中有抑制剂	叠氮化钠抑制 HRP 的活性
试剂在使用前未混匀	使用前混匀试剂
洗涤步骤过于剧烈	降低洗涤系统的压力
实验开始后，微孔变干燥	实验过程勿中断，应连续完成所有的实验步骤。
检测体积偏小	确保移液器已校正

问题三：边缘效应

可能原因	建议
蒸发	各步之间，须使用封版胶密封反应板。
温度不均匀	校准孵育箱，勿叠放反应板。

问题四：标准曲线不佳

可能原因	建议
倍比稀释标准品时未混匀	稀释标准品的每一步均需混匀
过早稀释	标准品在快要使用时稀释
加入的体积不正确	使用校准过的移液器，快速、等量的将标准品分配到各个微孔中。

问题五：标准曲线良好，但样本无检测信号

可能原因	建议
样本中无检测物或检测物含量极低	设置内参，重新实验
样本中其他物质影响/掩盖检测	作适当稀释，降低其他物质的干扰，或作系列稀释，检测回收率。
样本中检测物浓度过高，Hook 效应导致假低值	适当倍数稀释样本，检测物浓度尽量在试剂盒检测范围内。

问题六：重复性较差

可能原因	建议
微孔中有气泡	用针尖挑破气泡
试剂未混匀	确保充分混匀试剂
样本中有杂质或沉淀物	使用前离心
微孔包被面被吸头划破	加液时小心操作
使用用过的封板胶纸	每次须使用新的封板胶封住反应孔